



*initial*<sup>™</sup>  
IQ ONE SQIN

Krāsojamā keramikas  
sistēma krāsas  
un formas izveidošanai

**GC**

# 90% no visām restaurācijām tiek pasūtītas galvenajā tonī ...

Jau kādu laiku sānu zobu restaurācijas ir iespējams izgatavot no monolīta materiāla, piemēram, litija disilikāta vai cirkonija, un tās ir pietiekami estētiskas bez darbietilpīgām slāņošanas metodēm. Monolīto darbu apjoms pieaug.

Ar krāsojamo keramikas sistēmu **GC Initial IQ ONE SQIN** tikpat vienkāršā veidā var izgatavot estētiski pievilcīgas restaurācijas, kas piemērotas priekšzobu rajonam. Sistēma, balstoties uz GC Initial "IQ filozofiju", sastāv no dažādiem keramikas materiāliem, kas ir lieliski pielāgoti lietošanai kopā un ļauj efektīvi izgatavot estētiski pievilcīgas monolītas un bukāli reducētas restaurācijas priekšzobu rajonam.





*initial*<sup>™</sup>  
IQ ONE SOIN

## Initial IQ Lustre Pastes ONE

Universāla krāsojamā keramika ārējai krāsošanai, kā arī apakšstruktūru iekšējai raksturošanai. Lietojot kopā ar SQIN, kalpo arī kā savienotājslānis pie apdedzināšanas.

- ✓ Lietošanai gatava konsistence
- ✓ Raksturīga fluorescence
- ✓ 3D krāsu dziļums

## Initial IQ SQIN

Piešķir jūsu restaurācijai galīgo kontūru, nodrošina vitālu izskatu, virsmas tekstūru un dabisku spīdumu.

- ✓ Piešķir formu un tekstūru
- ✓ Pašglazējošs efekts
- ✓ 3D virsmas struktūra



## Initial Spectrum Stains

Smalki pulvera pigmenti individuālu papildus krāsu efektu atveidošanai.

- ✓
- ✓ Bezgalīgas krāsu nianšes
- ✓ Var piejaukt klāt pie Lustre Pastes ONE vai SQIN

Ar **GC Initial IQ ONE SQIN** – krāsojamo keramikas sistēmu krāsas un formas izveidošanai-jūs varat ātri un viegli, ar ievērojamu laika ietaupījumu, sasniegt augstus estētiskos rezultātus, kas ir salīdzināmi ar tradicionālo slāņoto restaurāciju.



## Kā tas darbojas? Izvēlies ...

### Mikroslāņošanas tehnika (mikro-bukāli samazinātas monolītiskās restaurācijas)

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE tiek izmantotas kā krāsas un individualizācijas slānis, nodrošinot nevainojamu savienojošo apdedzināšanu pirms SQIN pulveru uzklāšanas. Mikroslāņošanas tehnikā SQIN tiek ērti uzklāts 0,1-0,6 mm biezā slānī uz krāsotas un apdedzinātas Lustre Pastes ONE virsmas. Pateicoties smalkam laukšpata glazūras maisījumam, tiek radīts dabisks 3D efekts, kas nodrošina krāsas dziļumu un dabisku caurspīdīgumu.


SQIN pulveri, sajaukti ar formas un tekstūras šķidrumu, kļūst par ļoti kompaktu un blīvu keramikas suspensiju. To unikālās izmantošanas un modelēšanas īpašības atvieglos atsevišķu virsmu konturēšanu, ar pašglazējošām īpašībām pēc keramikas apdedzināšanas.



# ... ko tu glezno, to arī iegūsti!

## Glezošanas tehnika (monolītām restaurācijām)

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE - laukšpata bāzes 3D krāsojamā keramika- ir pieejama lietošanai gatavā konsistencē, piešķir jūsu monolītajām restaurācijām krāsas dziļumu, dabisku caurspīdīgumu un ļoti dabiska izskata glazējumu. Pastas var uzklāt biezākā slānī, garantējot nepārspējamu vitalitāti un ļoti dabiska izskata glazējumu. Tām piemīt fluorescences un tās pastiprina jūsu monolīto restaurāciju fluorescenci, īpaši, ja izmantojat Lustre Pastes ONE Neutral FLUO (L-NFL).

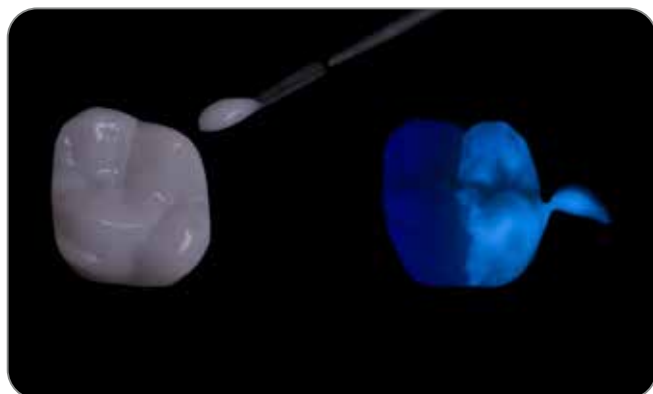

# Estētiska





## Iekšējais skaistums



Dabiska fluorescence



Sarkanā un baltā estētika



Maksimāla estētika mikro plānā slānī



## Viegli un taupa laiku



Izveidojiet formu un smalku tekstūru mitrā stadijā.  
Nekādas izmaiņas pēc apdedzināšanas.



Initial IQ Lustre Pastes ONE kalpo arī kā savienotājslānis pie apdedzināšanas.



Pašglazējošas īpašības.  
Iegūstiet skaisti glazētu virsmu ar vienu apdedzināšanu.

# Praktiska



# Daudzpusīga

## Viena sistēma ...




... visiem jūsu monolītajiem Zr un LDS keramikas darbiem



... mikroslāņošanas, kā arī krāsošanas tehnikai



... priekšzobu un sānu zobu restaurācijām

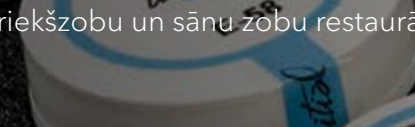

**ONE SQIN sistēmas komplekts**, kurā ietilpst galvenās keramikas komponentes, kas viegli, un ar ievērojamu laika ietaupījumu, ļauj iegūt augstus estētiskos rezultātus, kas ir salīdzināmi ar tradicionālām daudzslāņu restaurācijām.



### GC Initial IQ ONE SQIN SISTĒMAS KOMPLEKTS

- 10x SPS krāsa (SPS-1/2/7/8/13/14/17/18/19/20), 3 g
- 1x SPS Glazūra Fluo (GL-FLUO), 10 g
- 1x SPS Glazūra, Šķidrā, 25 ml
- 2x IQ LP ONE Spīduma pasta, Neitrālā (L-N/L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Spīdums, Ķermeņa tonis (L-A/B/C/D), 4 g
- 6x IQ LP ONE Emaljas efekta tonis (L-3/6/8/9/10 / OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Atšķaidīšanas šķidrums, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Atsvaidzināšanas šķidrums, 8 ml
- 5x IQ SQIN Dentīna pulveris (Body A/B/C/D/BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Emaljas pulveris (E-57/58/59/60/BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Caurspīdīgais Opal Booster pulveris (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN GUM pulveris (gaišs, tumšs, neitrāls), 10 g
- 1x IQ SQIN formas un tekstūras šķidrums, 25 ml
- 1x IQ LP ONE maisīšanas trauks
- 1x IQ LP ONE ota 00
- 1x IQ LP ONE ota 2
- 1x IQ LP ONE plastmasas vāciņš
- 1x IQ ONE SQIN tehniskā rokasgrāmata
- 1x IQ LP ONE krāsu tabula
- 1x SPS krāsu tabula




### GC Initial IQ SQIN KRĀSU KOMPLEKTS

- 5x IQ SQIN Dentīna pulveris (Body A/B/C/D/BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Emaljas pulveris (E-57/58/59/60/BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Caurspīdīgs Opal Bo0ster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN GUM pulveris (gaišs, tumšs, neitrāls), 10 g
- 1x IQ SQIN formas un tekstūras šķidrums, 25 ml
- 1x IQ SQIN tehniskā rokasgrāmata



### GC Initial IQ Lustre Pastes ONE - V-KRĀSU KOMPLEKTS

- 2x IQ LP ONE Lustre Pastes, Neitrālā (L-N/L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Lustre Pastes, Body tonis (L-A/B/C/D), 4 g
- 10x IQ LP ONE Emaljas efekta tonis (L-1/L-2/L-3/L-4/L-5/L-6/L-7/L-8/L-9/L-10), 4 g
- 1x IQ LP ONE Emaljas efekts Opal (L-OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE Emaljas efekts Value (L-V), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Atšķaidīšanas šķidrums, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Atsvaidzinošais šķidrums, 8 ml
- 1x IQ LP ONE maisīšanas trauks
- 1x IQ LP ONE ota 00
- 1x IQ LP ONE ota 2
- 1x IQ LP ONE krāsu tabula

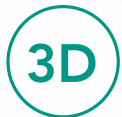

## ONE SQIN tehnika - visām jūsu cirkonija un litija disilikāta restaurācijām

- ✓ Veidojiet formu un smalkas tekstūras nianšes mitrajā posmā - nekādas izmaiņas pēc apdedzināšanas.
- ✓ Pašglazējošas īpašības - iegūstiet skaistu glazētu virsmu ar vienu apdedzināšanu.
- ✓ Optimāls fluorescences līmenis - nodrošina dabisku zobu izskatu dažādos apgaismojumos.
- ✓ Maksimāla estētika mikro plānā slānī.



Attēlu autori:

ZTM Michael Brusch (Vācija): 7. lpp. (vidējais un labais attēls); 9. lpp. (vidējais labais un apakšējais labais attēls);  
13. lpp. (vidējās kreisās kreisā puse, apakšējās labās puses attēla augšējā labā un labā puse)  
MDT Leonardo Cavallo (Itālija): 7. lpp. (kreisais attēls); 9. lpp. (augšējais kreisais attēls)  
MDT Patric Freudenthal (Zviedrija): 13. lpp. (kreisā vidējā attēla labā puse)  
ZTM Stefan Roozen (Austrija): 6. un 10. lpp.; 13. lpp. (apakšējā labā attēla kreisā puse)

*initial*<sup>TM</sup>  
IQ ONE SQIN

#### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<https://europe.gc.dental>

#### GC Nordic AB

Latvijas birojs  
Kurbada iela 3-3, Rīga  
Mob.tālr. +371.29.40.51.19  
ieva.jelisejeva@gc.dental  
<https://europe.gc.dental/lv-LV>

**GC**



Since 1921  
100 years of Quality in Dental