

initial™ IQ ONE SQIN

Opschilderbaar keramisch systeem voor kleur en vorm

Maximale esthetiek in een microlaag



90% van alle kronen wordt gemaakt in een standaard kleur...

Het is al enige tijd mogelijk om posterieure restauraties te maken uit één materiaal, zoals lithiumdisilicaat of zirkonium, dat voldoende esthetisch is zonder arbeidsintensieve laagsgewijze opbouwtechnieken. Er wordt steeds vaker om monolithisch werk gevraagd.

Met **GC Initial IQ ONE SQIN**, het opschilderbare keramische kleuren vorm systeem, kunnen esthetisch restauraties geschikt voor het anterieure gebied, op dezelfde eenvoudige manier worden gerealiseerd. Het systeem is gebaseerd op de GC Initial "IQ-filosofie" en bestaat uit verschillende keramische materialen die perfect zijn aangepast om samen te worden gebruikt en een efficiënte en esthetisch overtuigende afwerking van monolithische en buccaal gereduceerde restauraties garanderen.



Initial IQ ONE SQIN



Initial IQ Lustre Pastes ONE

Het meest veelzijdige opschilderbare keramiek voor interne inkleuring en externe karakterisering van onder-structuren. Bij gebruik met SQIN doet het ook dienst als connectie laag.

- ✓ Gebruiksklare consistentie
- ✓ 9 Verhoogde fluorescentie
- ✓ 9 3D-kleurdiepte

Initial IQ SQIN

Maakt de uiteindelijke contour van uw restauraties compleet met vitaliteit, textuur en natuurlijke glans.

- ✓ Eenvoudige vorm en textuur
- ✓ 9 Zelfglanzend effect
- ✓ 9 3D oppervlaktestructuur



Initial Spectrum Stains

Fijne poeder-kleuren voor extra individuele effecten.

- ✓ Oneindig veel kleurnuances
- ✓ 9 Kan worden gemengd met Lustre Pastes ONE of SQIN

Met GC Initial IQ ONE SQIN, het opschilderbare kleur-en vorm keramiek systeem, kunt u snel en eenvoudig hoge esthetische resultaten bereiken, vergelijkbaar met conventionele gelaagde restauraties, maar met een aanzienlijke tijds winst.



Hoe werkt het? U kiest...

Micro-laagsgewijze opbouwtechniek (monolithisch, micro buccaal gereduceerd)

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE worden gebruikt als kleur- en individualiseringslaag en garanderen een perfecte connectie voordat SQIN-poeders worden aangebracht. Bij de micro-laagsgewijze opbouwtechniek kan SQIN gemakkelijk in een laagdikte van 0,1 - 0,6 mm over het opgeschilderde en gebakken oppervlak van Lustre Pastes ONE worden aangebracht. Dankzij de verfijnde mix van op veldspaat gebaseerde glas ontstaat een levensecht 3D-effect, wat resulteert in diepe kleuren en levensechte translucentie.

In combinatie met de vorm- en textuurvloeistof worden de SQIN-poeders een zeer compacte en dichte keramische suspensie. De unieke toepassings- en modelleer eigenschappen maken het mogelijk om oppervlakte structuur aan te brengen, met zelfglanzende eigenschappen na het bakken van de keramiek.




...wat u schildert, is wat u krijgt!

Schildertechniek (monolitisch)

De GC Initial IQ Lustre Pastes ONE, opschilderbare 3D keramiek op basis van veldspaat is verkrijgbaar in een gebruiksklare consistentie en voegt kleurdiepte en levensechte translucentie met een zeer natuurlijk glazuur aan uw monolithische restauraties toe.

De mengsels kunnen in een dikkere laag worden aangebracht. Dit garandeert een onovertroffen vitaliteit en een zeer natuurlijk glans. Dankzij de inherente fluorescentie zijn ze nauwkeurig afgesteld om de fluorescentie van uw monolithische restauraties te verbeteren, met name bij gebruik van de Lustre Paste ONE Neutral FLUO (L-NFL).

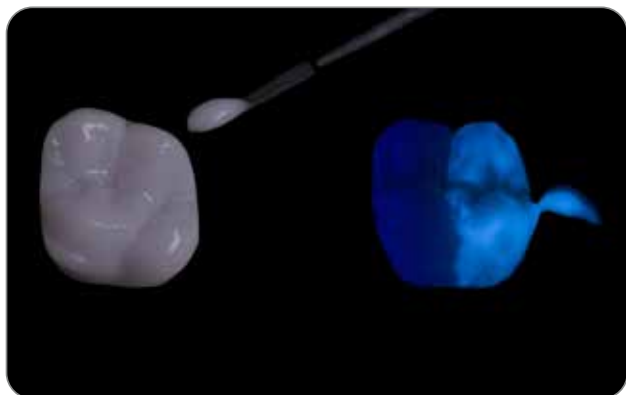



Esthetisch

Schoonheid van binnenuit



Natuurlijke fluorescentie



Rode en witte esthetiek



Maximale esthetiek in een microlaag



Eenvoudig en tijdbesparend



Creëer vorm en fijne textuur in het natte stadium.
Geen veranderingen na het bakken.



Initial IQ Lustre Paste dient ook als connectie laag.



Zelfglanzende eigenschappen.
Krijg een prachtige geglazuurde afwerking met één keer bakken.

Praktisch





Veelzijdig

Eén systeem...



...voor al uw Zr en LDS vol-keramische uitvoeringen



...voor zowel micro-laagsgewijze opbouwals schildertechnieken



...voor anterieure en posterieure restauraties





GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

- 10x SPS Kleur (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3g
- 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10g
- 1x SPS Glazuurvloeistof, 25ml
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutraal (L-N / L-NFL), 4g
- 4x IQ LP ONE Lustre Lichaamskleur (L-A / B / C / D), 4g
- 6x IQ LP ONE Enamel-effect kleur (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4g
- 1x IQ LP ONE/NF Verdunningsvloeistof, 8ml
- 1x IQ LP ONE/NF Verfrissingsvloeistof, 8ml
- 5x IQ SQIN Poeder-dentine (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
- 5x IQ SQIN Poeder-enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
- 1x IQ SQIN Poeder Doorschijnende Opal Booster (TO), 10g
- 3x IQ SQIN Poeder-gum (licht, donker, neutraal), 10 g
- 1x IQ SQIN Vorm-en-textuurvloeistof, 25 ml
- 1x IQ LP ONE Mengkom
- 1x IQ LP ONE Borstel 00
- 1x IQ LP ONE Borstel 2
- 1x IQ LP ONE Plastic afsluitdopje
- 1x IQ ONE SQIN Technische handleiding
- 1x IQ LP ONE Kleurenkaart
- 1x SPS Kleurenkaart



ONE SQIN System Set om gemakkelijk hoge esthetische resultaten te bereiken, vergelijkbaar met conventionele gelaagde restauraties, maar met een aanzienlijke tijdsbesparing. De set bevat een selectie van de belangrijkste keramische componenten.

GC Initial IQ SQIN KLEURENSET

- 5x IQ SQIN Poeder-dentine (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Poeder-enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Poeder Doorschijnende Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN Poeder-gum (licht, donker, neutraal), 10 g
- 1x IQ SQIN Vorm-en-textuurvloeistof, 25 ml
- 1x IQ SQIN Technische handleiding



GC Initial IQ Lustre Pastes ONE V-KLEURENSET

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutraal (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Lustre Lichaamskleur (L-A / B / C / D), 4 g
- 10x IQ LP ONE Enamel-effect Kleur (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel-effect Opal (L-OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel-effect Waarde (L-V), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Verdunningsvloeistof, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Verfrissingsvloeistof, 8 ml
- 1x IQ LP ONE Mengkom
- 1x IQ LP ONE Borstel 00
- 1x IQ LP ONE Borstel 2
- 1x IQ LP ONE Kleurenkaart

ONE SQIN techniek - voor al uw zirkonium en lithiumdisilicaat restauraties

- ✓ Creëer vorm en fijne textuur details in het natte stadium - geen veranderingen na het bakken.
- ✓ 9 zelfglanzende eigenschappen - krijg een prachtige afwerking met één keer bakken.
- ✓ 9 Optimaal fluorescentieniveau - zorgt onder alle lichtomstandigheden voor het uiterlijk zoals van natuurlijke tanden.
- ✓ 9 Maximale esthetiek in een microlaag.



Foto met dank aan:

ZTM Michael Brüsck (Duitsland): p7 (middelste en rechterafbeelding); p9 (middelste afbeelding rechts en rechtsonder);

p13 (linkerzijde van middelste linker-, rechter- en rechterzijde van onderste afbeelding)

MDT Leonardo Cavallo (Italië): p7 (linkerafbeelding); p9 (bovenste linkerafbeelding)

MDT Patric Freudenthal (Zweden): blz. 13 (rechterzijde van middelste linkerafbeelding)

ZTM Stefan Roozen (Oostenrijk): blz. 6 en blz. 10; blz. 13 (linkerzijde van onderste rechterafbeelding)

*initial*TM IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/nl-NL>