



initial[™]
IQ ONE SQIN

Sistem ceramic
pentru personalizarea
culorii și formei

'G.C.'

90% dintre dinți sunt realizați într-o singură nuanță standard...

De ceva timp, restaurările posterioare s-au putut realiza dintr-un singur material, precum disilicat de litiu sau zirconia, fiind suficient de estetice, fără a fi necesare tehnici de stratificare laborioase. Utilizarea restaurărilor monolitice este în continuă creștere.

Cu **GC Initial IQ ONE SQIN** - Sistemul ceramic pentru personalizarea culorii și formei - restaurările estetice dedicate zonei anterioare pot fi obținute într-un mod la fel de simplu. Având la bază „Filozofia IQ” GC Initial, sistemul constă în diferite materiale ceramice care sunt perfect adaptate pentru a fi utilizate împreună. În acest fel se poate obține un rezultat final cu maximum de eficiență și estetică a restaurărilor monolitice cât și a celor reduse pe fața vestibulară.





initial[™]
IQ ONE SOIN

Initial IQ Lustre Pastes ONE

Cea mai versatilă ceramică pentru colorarea externă precum și pentru caracterizarea internă a substructurilor. Lustre Pastes ONE are funcție de strat de legatură, când este utilizat în combinație cu SQIN.

- ✓ Consistență ideală pentru utilizare imediată
- ✓ Fluorescență inerentă
- ✓ Profunzime 3D a culorii

Initial IQ SQIN

Completează conturul final al restaurării dumneavoastră oferind vitalitate, textură și luciu natural.

- ✓ Forme și textură ușor de obținut
- ✓ Efect de auto-glazurare
- ✓ Structură 3D a suprafeței



Initial Spectrum Stains

Pulbere fină pentru colorare cu efect de extra-individualizare

- ✓ Nuanțe infinite de culoare
- ✓ Poate fi amestecat cu Lustre Pastes ONE sau SQIN

Cu **GC Initial IQ ONE SQIN** - Sistemul ceramic pentru personalizarea culorii și formei – se pot obține rapid și simplu rezultate estetice ridicate, comparabile cu restaurările stratificate convențional, dar cu reducerea semnificativă a timpului de lucru.



Cum funcționează? Îți poți alege...

Tehnica de micro-stratificare (monolitic redus micro-vestibular)

GC Initial IQ Luster Pastes ONE sunt folosite ca strat de culoare și individualizare, oferind un suport de legătură perfect înainte de aplicarea pulberilor SQIN. În tehnica de micro-stratificare, SQIN se aplică cu ușurință într-o grosime de 0,1 - 0,6 mm peste stratul ars de Lustre Pastes ONE. Datorită amestecului rafinat pe bază de feldspat, se creează un efect 3D, rezultatul fiind profunzimea culorii și transluciditatea realistă.

Amestecate cu lichidul Form and Texture, pulberile SQIN devin o pastă ceramică foarte compactă și densă. Proprietățile lor unice de aplicare și modelare vor facilita crearea unei texturi individuale a suprafeței, cu proprietăți de auto-glazurare după arderea ceramicii.





...ce pictezi este ceea ce primești!

Tehnica de colorare (monolitic)

Disponibil într-o consistență ideală pentru utilizare imediată, GC Initial IQ Luster Pastes ONE este o ceramică de personalizare 3D pe bază de feldspat. Aceasta permite realizarea restaurărilor monolitice cu un plus de profunzime a culorii, o transluciditate realistă și o glazură foarte naturală.

Pastele pot fi aplicate într-un strat mai gros, garantând o vitalitate de neegalat și o glazură foarte naturală. Cu o fluorescență inerentă sunt perfecte pentru a crește fluorescența restaurărilor monolitice, în special când este folosit Luster Paste ONE Neutral FLUO (L-NFL).

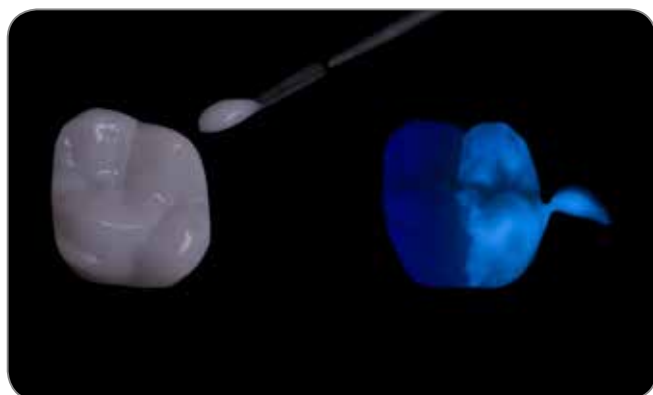

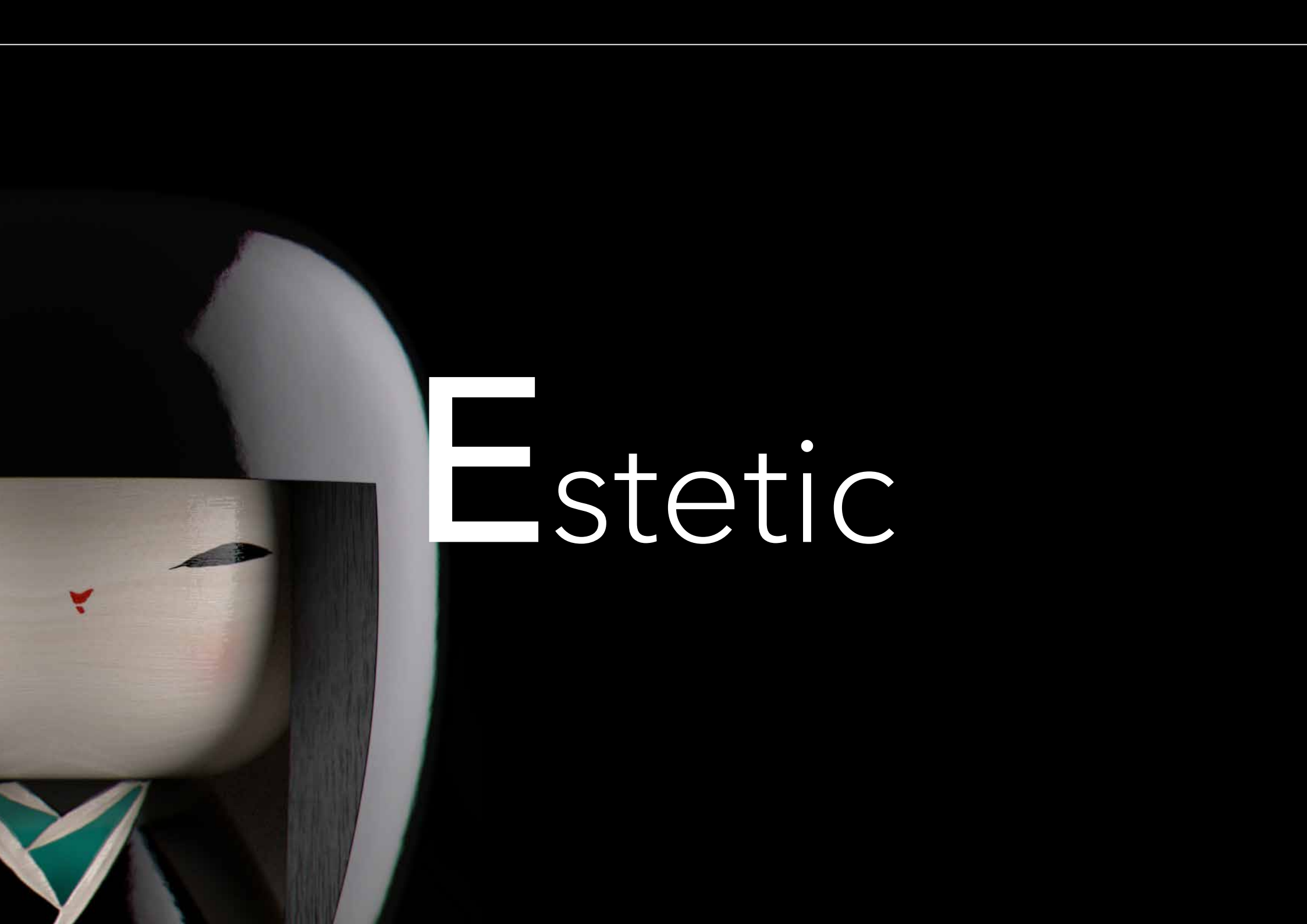

Estetic

Frumusețe din interior



Fluorescență naturală



Estetică albă și roz



Estetică maximă într-un micro-strat



Utilizare facilă și reducerea timpului de lucru



Crearea formei și texturii fine în stadiul umed.
Nu există modificări după ardere.




Initial IQ Luster Pastes ONE are și funcție de strat de legătură.



Proprietăți de auto-glazurare.
Obținerea unei suprafețe perfect glazurate într-o singură ardere.

P ractic



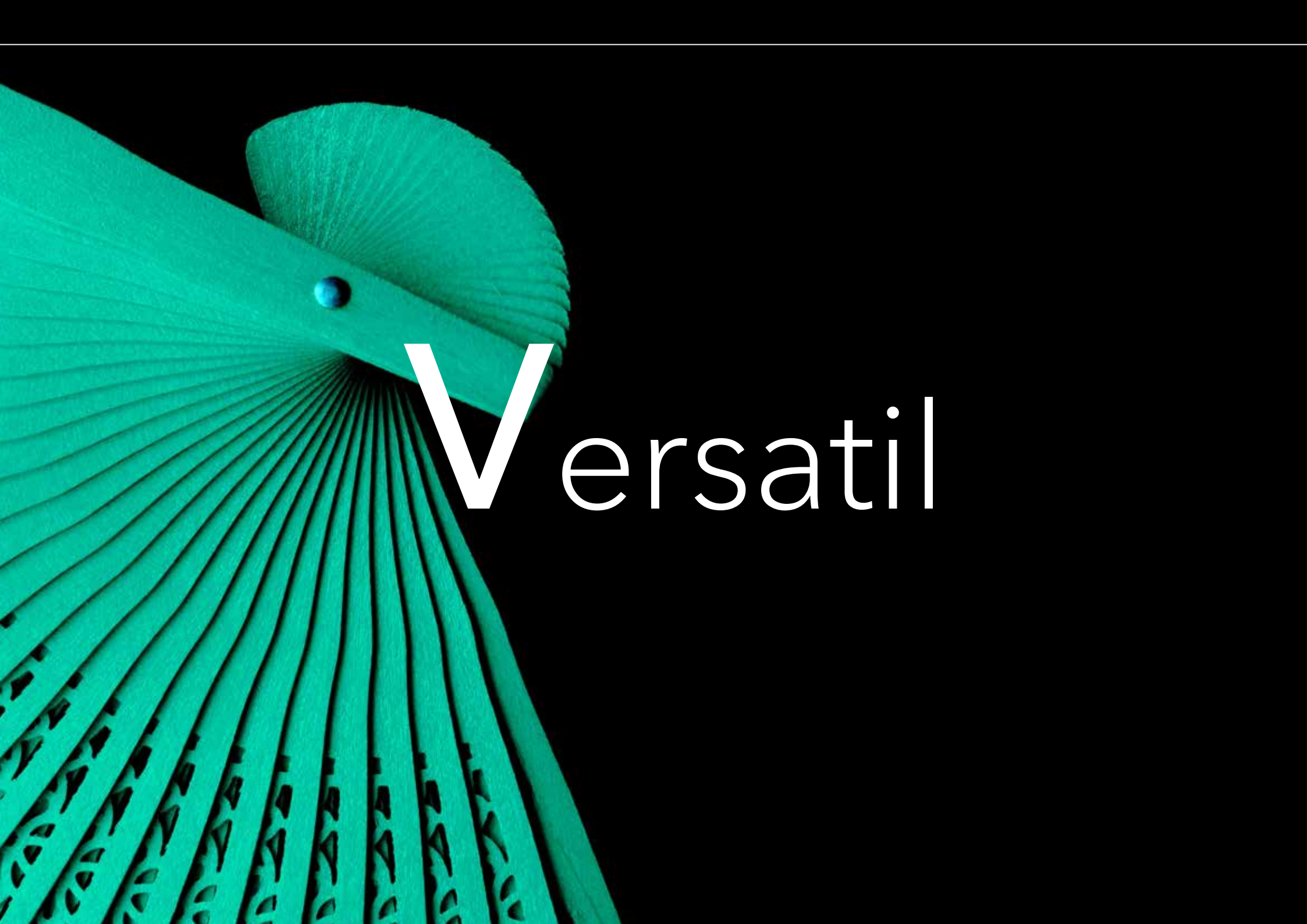

Versatil

Un singur sistem...




... pentru toate realizările integrale ceramice din Zr și LDS



... pentru micro-stratificare și tehnici de colorare



... pentru restaurări anterioare și posterioare

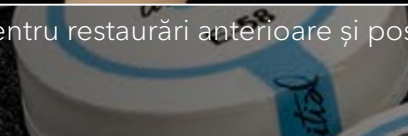

ONE SQIN System Set conține o selecție de componente ceramice importante pentru a obține ușor rezultate de o estetică ridicată, comparabile cu cele stratificate convențional, dar cu economie semnificativă de timp.



GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

- 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g
- 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
- 1x SPS Glaze Liquid, 25 ml
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml
- 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1x IQ LP ONE Mixing Dish
- 1x IQ LP ONE Brush 00
- 1x IQ LP ONE Brush 2
- 1x IQ LP ONE Plastic Cover
- 1x IQ ONE SQIN Technical Manual
- 1x IQ LP ONE Colour Chart
- 1x SPS Colour Chart



GC Initial IQ SQIN SHADES SET

- 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1x IQ SQIN Technical Manual



GC Initial IQ Lustre Pastes ONE - V-SHADES SET

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IO LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 10x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8 ml
- 1x IQ LP ONE Mixing dish
- 1x IQ LP ONE Brush 00
- 1x IQ LP ONE Brush 2
- 1x IQ LP ONE Colour Chart



Tehnica ONE SQIN - pentru toate restaurările din zirconiu și disilicat de litiu

- ✓ Crearea detaliilor de formă și textură fină în stadiul umed - Nu există modificări după ardere.
- ✓ Proprietăți de auto-glazurare - Obținerea unei suprafețe perfect glazurate într-o singură ardere.
- ✓ Nivel optim de fluorescență - Asigură aspectul natural al dinților în toate condițiile de iluminare.
- ✓ Maximum de estetică într-un singur micro-strat.



Foto prin amabilitatea:

ZTM Michael Brusch (Germania): p7 (imagini din mijloc și din dreapta); p9 (imagini din mijloc dreapta și din dreapta jos); p13 (imagini din partea stângă din mijloc stânga, dreapta sus și partea dreapta din dreapta jos)
MDT Leonardo Cavallo (Italia): p7 (imaginea din stânga); p9 (imagine stânga în partea de sus)
MDT Patric Freudenthal (Suedia): p13 (imagine partea dreapta din mijloc stânga)
ZTM Stefan Roozen (Austria): p6 și p10; p13 (imagine partea stângă din partea dreaptă jos)

*initial*TM
IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Romania
Str. Carol Davila 21A,
etaj 2, ap.17, sector 5
RO - 050451 București
Tel: +40.31.425.75.27
info.romania@gc.dental
<https://europe.gc.dental/ro-RO>

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental