

Upravlajte svim svojim izazovima



Lepota  
**crvene** i bele boje

*initial*

GC Initial®  
IQ Lustre  
Pastes NF,

univerzalne  
trodimenzionalne  
keramičke boje

**GC**

# Upravljajte svim svojim izazovima pomoću GC Initial

**GC Lustre Pastes NF, jedinstvene trodimenzionalne keramičke boje za estetiku** svih vaših omiljenih radova... samo bojenjem.

Za **nenadmašnu vitalnost** i **prirodni sjaj** svih vaših radova više ne trebate složeno slojevanje ili dodatne cikluse pečenja.

Sa bojama Lustre Pastes NF (na bazi finih keramičkih čestica) koraci izrade krunica i mostova ostaju isti, bez obzira na tehniku izrade radova na bazi keramike.

Trebate li promenu boje, svetline, vrednosti sive ili površinskog sjaja slojevanih krunica i mostova? Možete koristiti Lustre Paste NF na svim keramikama GC Initial linije proizvoda.



Tražite način kako dodati vitalnost jednokomadnim radovima izrađenim CAD/CAM tehnologijom? Lustre Pastes NF rešenje je za sve slučajeve.



Volite prešati keramiku... koristite GC Initial IQ - One Body, Press-over sisteme ili koristite litijum-disilikat kao osnovu, te ih zatim kasnije karakterizujete bojom.



Ovaj vam sistem omogućava individualizovanje krunice i mostova i izradu prirodnog prelaza sa ruba krunice do gingive... samo bojom.




Obojite keramiku pomoću  
**GC Lustre Pastes NF**  
za estetiku bele i crvene boje

## Lustre Pastes NF Gum Shades - boje za gingivu

Sve što vam treba za izradu prirodnog prelaza sa ruba krunice na gingivu u nekoliko jednostavnih koraka.

Pet jedinstvenih Lustre Pastes boja za gingivu omogućava individualno prilagođavanje, za usklađivanje s prirodnim bojama gingive. Možete koristiti 4 modifikatora (Gum Modifiers) koji se mogu mešati i omogućavaju neograničenu kreativnost i reprodukciju najosjetljivije gingive bez ikakvog problema.

Lustre Pastes NF Gum Shades baziraju se na posebnom izboru nefluorescentnih, roze obojenih čestica keramike za savršenu imitaciju izgleda prirodne gingive.

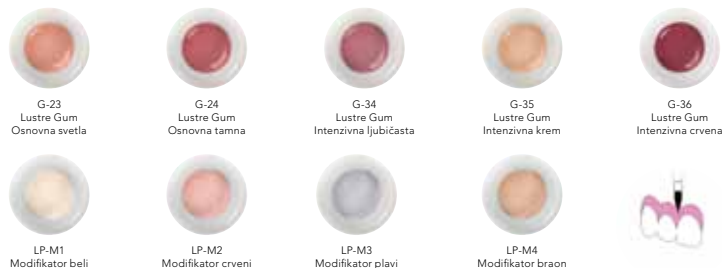


## Lustre Pastes NF - V-boje

Željena V-boja izrađuje se pomoću Lustre Pastes NF u rasponu boje od "Body A - D". Ovaj proces, koji traje samo dva minuta, sadrži sve potrebno za izradu V-boja. Kao stručnjak, jednostavno koristite druge raspoložive boje za izradu visoko estetskih rezultata.

Sa Lustre Pastes NF lako možete modifikovati konvencionalne keramičke krunice i mostove. Promena svetline, vrednosti boje i boje nikad nije bila lakša!

Najbrže rešenje za sve jednokomadne radove od cirkonijum-oksidge keramike.

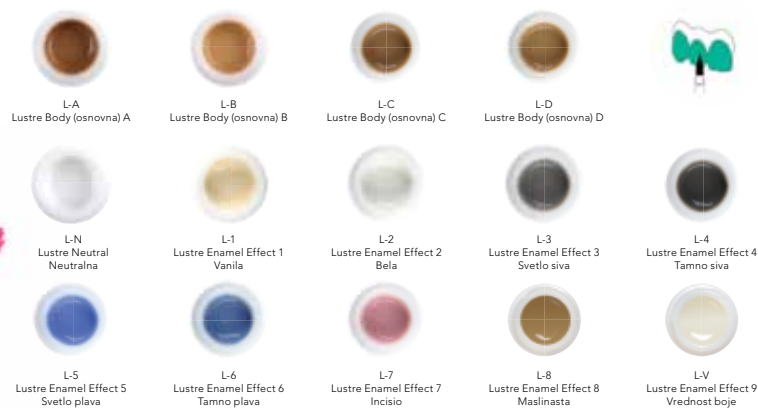

# Dva sistema - jedan pristup

Estetika **crvene** i bele boje



# Savršen završni sjaj vašim radovima



Željena V-boja izrađuju se pomoću Lustre Pastes NF u rasponu boje od "Body A - D". Ovaj proces, koji traje samo dva minuta, sadrži sve potrebno za izradu V-boja. Kao stručnjak, jednostavno koristite druge raspoložive boje za izradu visoko estetskih rezultata.



Baza



Nanošenje Body boja



Izgled završnog rada istaknute boje i sjaja

Pomoću Lustre Pastes NF lako možete modifikovati konvencionalne keramičke krunice i mostove. Promena svetline, boje i vrednosti boje nikad nije bila lakša!



Svetlina



Boja



Vrednost boje

Postignite najbolje estetske rezultate pastama Lustre Pastes NF u cut-back tehnici za svoje prešane ili slojevane radove. Posle bojenja pastama Lustre Pastes NF, završni izgled postiže se korišćenjem CL-F za visoku translucenciju te opalescentnim i incizalnim bojama.



Cut-back tehnika



Koristite Lustre Pastes



Opalescentne i incizalne boje




Završni izgled

## Najbrže rešenje za sve jednokomadne radove od cirkonijum-oksidge keramike





- Širok raspon koeficijenta toplinske ekspanzije, kako bi se mogla koristiti cela paleta proizvoda GC Initial keramike i gotovo sve vrste drugih keramika ili veštačkih keramičkih zuba.
- Bez složenog slojevanja ili dodatnih ciklusa pečenja. Brzo - lako - sigurno. Paste spremne za upotrebu sa finim tiksotropnim svojstvima, za lako i tačno nanošenje.
- Tečnosti za razređivanje i osvežavanje za održavanje optimalne konzistencije do završetka rada.

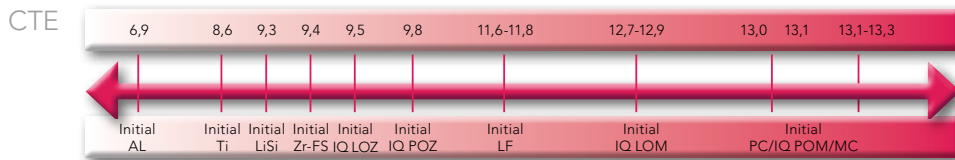

### GC Initial Lustre Pastes Set NF - komplet V-boja

- 5 osnovnih boja za najlakše postizanje rada od V-boje.
- 9 boja za napredno korišćenje, za podsticanje vaše umetničke strane i bojanje belih mrlja, dekalifikacija, tankih linija i pukotina.

#### Sastav kompleta:

- 1 Neutral boja (4 g)
- 1 Value boja (4 g)
- 4 Body boje (4x4 g)
- 8 glednih boja za efekt (8x4 g)
- 1 tečnost za razređivanje (8 ml)
- 1 tečnost za osvežavanje (8 ml)
- 1 podloga za mešanje
- 2 četkice
- Karta boja
- Tehnički priručnik



### GC Initial Lustre Pastes Set NF - komplet boja za gingivu

- 5 pasti gotovih za upotrebu u boji gingive, sa idealnom tiksotropnošću, za lako i precizno nanošenje.
- 4 modifikatora za gingivu, koji se mogu mešati i omogućavaju neograničenu kreativnost za oponašanje prirodnog gingivnog sklada.

#### Sastav kompleta:

- 5 boja za gingivu (5x4 g)
- 4 modifikatora za boje za LP NF (4x3 g)
- 1 tečnost za razređivanje (8 ml)
- 1 tečnost za osvežavanje (8 ml)
- 1 podloga za mešanje
- 2 četkice
- Karta boja
- Tehnički priručnik



#### Slike:

Michael Brusch-M.B.Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Nemačka  
 Philippe Llobell, Saint-Didier, Francuska  
 Przemek Seweryniak, Cosmodent Dental Laboratory, Malmö, Švedska  
 Peter Schaller, Esthetic Concept GmbH, München, Nemačka

#### GC EUROPE N.V.

Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info@gceurope.com  
 www.gceurope.com

#### GC EUROPE N.V.

GC EEO - Serbia  
 Cvijićeva 82  
 RS - 11000 Beograd  
 Tel. +381.11.20.88.033  
 Fax. +381.11.20.88.033  
 serbia@eoo.gceurope.com  
 www.eoo.gceurope.com

