

# משפחת המוצרים



## everStick® מבית GC

### סיבי זכוכית לרפואת שיניים יומיומית

• אמין • נוח לשימוש • פולשנות מינימלית • חזק במיוחד  
• אסתטי • מוכח מבחינה מדעית • חסכוני

**everStick®**  
GIANT OF FIBRES



## מבחר מוצרי everStick®

**everStick®C&B**  
Content Article number  
2 x 12 cm 900833  
1 x 8 cm 900834  
Nr. of fibres: 4000



**everStick®POST**  
Content Article number  
Diameter 1.0, 10 posts 900828  
Diameter 1.2, 10 posts 900829  
Diameter 1.5, 10 posts 900830



**everStick®PERIO**  
Content Article number  
2 x 12 cm 900831  
1 x 8 cm 900832  
Nr. of fibres: 2000



**everStick®NET**  
Content Article number  
30 cm² 900818



**everStick®ORTHO**  
Content Article number  
2 x 12 cm 900822  
Nr. of fibres: 1600



**Stick®RESIN, 5 ml**  
Article number 900823



**GC G-aenial Universal Flo  
(2 ml/3.4 g per syringe)**  
Refill: 1 syringe, 20 Dispensing Tip III Plastic  
Content Article number  
shades A2 004203  
shades A3 004204



**Stick®STEPPER**  
Article number 900825



**everStick®INTRO**  
Article number 900835  
everStickC&B 8 cm  
everStickPERIO 8 cm  
StickREFIX D 1 silicone instr.



**everStick®COMBI**  
Article number 900836  
everStickC&B 8 cm  
everStickPERIO 8 cm  
everStickNET 30 cm²  
everStickPOST 1.2 5 posts  
StickSTEPPER 1 hand instr.  
Stick®REFIX D 1 silicone instr.



**everStick®POST INTRO**  
Article number 900827  
everStickPOST 0.9 5 posts  
everStickPOST 1.2 5 posts  
everStickPOST 1.5 5 posts  
StickRESIN 5 ml



**everStick®STARTER KIT**  
Article number 900819  
everStickC&B 8cm  
everStickPERIO 8cm  
everStickNET 30cm²  
everStickPOST Ø 1.2 5 posts  
StickRESIN bottle 5 ml  
G-aenial Universal Flo syringe 2 ml  
1x StickREFIX D 1 silicone instr.  
StickSTEPPER hand instr.  
StickCARRIER hand instr.



**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com


**GC Israel**  
4 Koifman st.  
Tel Aviv  
Israel 68012  
Tel. +972.3.79.79.610  
Fax. +972.3.51.61.982  
info@gcisrael.com  
http://www.gcisrael.com







מכט בחתך רוחבי של סיב everStick. סיבי זכוכית ספוגים ב-PMMA ו-bis-GMA.

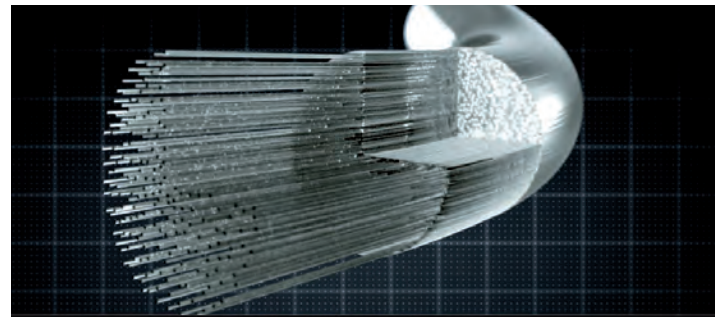

בתוך סיב everStick. סיבים נפרדים, bis-GMA ו-PMMA לקבלת מבנה IPN הייחודי.

## everStick® לרפואת שיניים יומיומית

סיבי הזכוכית של everStick פותחו במטרה לספק פתרונות לרפואת שיניים מודרנית וידידותית למטופל. הסיבים של everStick ספוגים בפולימר תרמופלסטי ובמטריצת שרף המתקשה באור.

מוצרי everStick מספקים את היתרונות של רפואת שיניים עם פולשנות מינימלית, כאשר רקמת השן הבריאה של המטופל עצמו נשמרת. למשך פרק הזמן הארוך ביותר שניתן מבחינה קלינית. לפיכך, אפשרויות טיפול אחרות נותרות זמינות גם הן אם המטופל נזקק להן בעתיד.

## IPN - הלב של סיבי everStick®

קשירה נכונה בין הסיבים והקומפוזיט היא גורם המפתח לטיפול מוצלח. רק מוצרי everStick מאופיינים במבנה רשת ייחודי, הרשום כפטנט, של פולימרים המשולבים זה בזה (IPN). מבחינה קלינית, כך מתאפשרת קשירה מעולה המאפשרת השמה מהימנה בהצמדה למשטח וטיפול מושלם.

החשיבות של מבנה ה-IPN טמונה בכך שניתן להפעיל מחדש משטחים גם לאחר הפולימריזציה הסופית. הפעלה מחדש חיונית לקשירה מעולה כאשר:

- שחזורים המיוצרים במעבדה ומודבקים לשן באמצעות צמנט
- תיקונים של שחזורים קיימים

מבנה ה-IPN מבדל את מוצרי everStick מכל יתר הסיבים או החומרים המורכבים הקיימים.


## היתרונות של סיבי everStick®

- טיפולים בשיטת פולשנות מינימלית, שמירה מקסימלית על חומר השן הקיים
- מאפיינים מכאניים מעולים
- דרך קישור ייחודית הרשומה כפטנט
- חוזק הסיבים זהה לחוזק מתכת
- בעלי גמישות דומה לזו של דנטין
- נתוני מחקר מקיפים
- למעלה מ-300 מחקרים
- נתונים קליניים שנאספו לאורך זמן רב, עם יחסי הצלחה מצוינים

## everStick®C&B

עבור גשרים מורכבים המחזקים בסיבים, בשיטת פולשנות מינימלית

- גשרים אדהזיביים
- גשרים מסוג Onlay ו-Inlay
- גשרים היברידיים וגשרים זמניים
- גשרים המיוצרים במעבדה

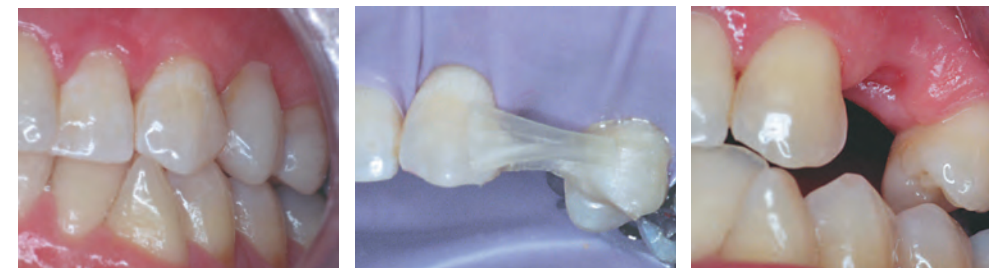

## everStick®POST

מבנים מתקדמים לאחר טיפולי שורש

- מבנים בהתאמה אישית לתעלה



## everStick®PERIO

לקיבוע השיניים

- קיבוע של שיניים ניידות
- קיבוע של שיניים ניידות בשילוב עם גשר אדהזיבי



## everStick®NET

לקיבוע נוח ואסתטי של שיניים לאחר טראומה

- קיבוע בוקאלי של שיניים פגועות
- קיבוע בוקאלי של שיניים ניידות
- תיקון וחיזוק של ציפויי חרסינה



## everStick®ORTHO

לשימור אסתטי

- לפלטה אורתודנטית ידידותית-למטופל, שאינה מכילה מתכת

